


colors



Bumpers
مداد حماية

seamless pipe
D90mm
thickness 3mm
مواسير سيميلس
قطر 9 سم
ickness 3 مم

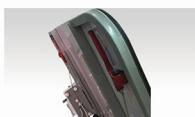

Electric bed

BED 5E- ICU1

سرير كهربائي

Manual and electric CPR
يدوي وكهربائي CPR



Optional: Weight scale
إختياري: ميزان



Easy to attach
and detach
سهل الفك والتركيب

سطح السرير مكون من 4 أجزاء ، مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL) ، منفذ الأشعة ، حامل للكاسيت الأشعة.

أجناب بلاستيك 4 قطع قابلة للطي.

عقل 5 بوصة بفرامل مركزية ، عجلة ننهم محورية .

لوحة الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS

جسم السرير مصنوع من علىب 6 × 4 سم و 4 × 7 سم السماكة 1.8 مم دهان إليكتروليسيتات مزود ب 4 صدادات 2 من كل جهة.

لحام ثانى أكسيد الكربون.

تنظيف الحديد بالترمبل.

الابعاد : الطول 216 سم (مع امكانية زيادة طول السرير إلى 231 سم) العرض : 98 سم.

الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل من 0° إلى 45° (مع تدرج زاوية الرجل) ، التغير في الارتفاع من 50 سم

إلى 90 سم ، ميل طولي في اتجاه الرأس من 0° إلى 30° ، ميل طولي في اتجاه الرجل من 0° : 30° CPR ، يدوى و كهربائي ، وضع الكرسي

وضع الصفر ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت، وضع الإنحسار التلقائي.



Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan

إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم



Central locking 3D
فرامل مركبة 3D

- 20 موتور عمودي للتحكم في الارتفاع ، 2 موتور للتحكم في زاوية الظهر والرجل، صوت منخفض.
- وحدة تحكم للبiped ، وحدة تحكم التعرير ، وحدة تحكم علي الجوانب (من الداخل والخارج).
- بطارية للطوارئ.

• 4 أماكن لحامل محلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل، 4 حامل كيس بول.

• صداد حماية عجلة 3 بوصة لكل زاوية في السرير.

• الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوغرام.

• إختياري : إمكانية تركيب موائيات ماركة LINAK (صناعة دينماركي).

• إختياري: ميزان.

• إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم .



- 4 sections bed board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent, cassette holder slot, can be extended with the bed length.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central locking, one of them is directional
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 4 bumpers.
- Bed frame is made of 6x4 & 4x7 steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated. • Co2 Welding.
- Dimensions: Length can be extended from 216 cm to 231cm, Width: 98. • Sand blasting.
- Positions : Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting is from 0° to 45° ,knee movement with gradual mechanism height adjustment from 50 cm to 90cm : Trendlingburg to 30° revers – trendlingburg to -30° degree , Manual & electric CPR , Chair position, zero position, auto contour position auto regression position.
- Hand control, nurse Control, side control (inner and outer) .
- Backup battery. • Safe working load 250kg.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole
- 3 inches wheels as bumpers on each corner
- Optional: LINAK motors (Denmark) .
- Optional: weighting scale.
- Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan

Optional
LINAK



Bed extension 15cm
إمكانية زيادة طول السرير 15سم



Bumpers
صداد حماية



Side control (inner and outer)
تحكم علي الجوانب (من الداخل والخارج)



Nurse Control
تحكم التعرير



X-ray translucent cassette holder slot
منفذ للأشعة يحمل لكاسيت الأشعة



Auto regression position
وضع الإنحسار التلقائي



Co2 Welding
حامٍ ثاني أكسيد الكربون



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترمبل