




- made of specially profiled high quality aluminum alloy with modular electrical & gas system to cover customer requests.
- designed to provide a smooth contour & minimum sharp edges.
- Any unit length is available.
- complete separation between gas & electrical tracks.
- High quality electrostatic coating with different colors upon request.
- direct lighting & indirect light.
- A diagnostic lighting ( with or without arm ) can be supplied upon request.
- All medical gas outlet for different standards can be supplied.
- Comply with DIN 3260-2 and EN737-1 standards.
- Electrical outlets for all standards upon request.
- Nurse call switch.
- Telephone or network socket.
- easy for assembling and maintenance .
- Accessories & options:
  - Wideband remote handeet for direct light, indirect light & nurse calling.

- مصنوعة من الألمنيوم المسحوب
- محيط سلس والحد الأدنى من الحواف الحادة.
- جميع الأطوال متاحة.
- الوحدة مكونة من عدة قنوات تسمح بفصل الغازات الطبية عن التركيبات الكهربائية.
- دهان الوحدة إلكتروستاتيكية و الألوان حسب الطلب.
- إضاءة مباشرة و غير مباشرة.
- يمكن توفير إضاءة تشخيصية (مع أو بدون ذراع) عند الطلب.
- يمكن تركيب أي نوع من مخارج الغازات الطبية علي حسب رغبة العميل.
- مطابق للمواصفات القياسية DIN 3260-2 و EN737-1.
- يمكن تركيب أي نوع من مخارج الكهرباء علي حسب رغبة العميل.
- مفتاح استدعاء التمريض.
- مخرج تليفون أو شبكة اتصال.
- سهولة التجميع والصيانة.
- إكسسوارات:
  - ريموت للتحكم في الإضاءة المباشرة و الإضاءة الغير المباشرة وأيضا التحكم في استدعاء التمريض.



**BS2**

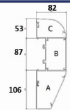


**BS3**



**A:Voltage wire**  
**B:Gases section**  
**C:Voltage wire**



**BS4**

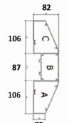

جميع الأطوال متاحة.  
Any unit length is available



التعليق في السقف  
Ceiling-mounted



تعليق رفوف و ادراج  
Mounted shelves and drawer