

Bumpers
صنادق حماية

seamless pipe
D90mm
thickness 3mm

مواسير سيملس
قطر 9 سم
تخانة 3 مم

Square pipe
40*70*2mm

Central locking 3D
فراصل مركزية 3D



Hydraulic patient trolley

تروللي مريض هيدوليكي

TR 6H553311

Optional

**POWER-
PACKER®**



X-ray translucent
cassette holder slot

منفذ للأشعة
حامل لكاسيت الاشعة

- سطح الترولي مكون من 4 أجزاء, مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL), منفذ للأشعة , حامل لكاسيت الأشعة.
- أجناب بلاستيك (ABS) 2 قطعة قابلة للطوي
- عجل 5 بوصة بفراصل مركزية, عجلة منهم محورية .
- أيدي لدفع الترولي .
- جسم الترولي مصنوع من علب 4 × 6 سم و 4×7 سم السمك 1.8 مم , دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميل.
- الأبعاد : الطول : 198 سم , العرض : 78 سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° الي 70° , زاوية حركة الرجل 0° الي 45° , التغير في الارتفاع من 50 سم إلي 88 سم , ميل طولي في إتجاه الرأس 30° , ميل طولي في إتجاه القدم 30° , وضع الكرسي.
- مضخة هيدروليكية للإرتفاع , 5 بستم .
- 4 أماكن لحامل المحلول.
- صنادق حماية عجلة 3 بوصة لكل زاوية في السرير.
- حامل إسطوانة أكسجين.
- الوزن الأيمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- مرتبة, حامل محلول.

- إختياري : أجناب الومنيوم قابلة للطي , عجل 5 بوصة
بفراصل علي كل عجلة.
- إختياري : المضخة الهيدروليكية POWER PACKER هولندي.
- إختياري : سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم .




TR 6H23101



- 4 sections trolley board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent cassette holder slot .
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central locking steering wheel.
- Push handles.
- Bed frame is made of 6 × 4 & 4×7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding. • Sand blasting.
- Dimensions: Length: 198cm, Width: 78cm.
- positions : Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45 , height adjustment from 50cm to 88cm, trendlingburg : 30° , reverse – trendlingburg : -30° , Chair position.
- Lifting hydraulic pump, 5 Gas springs.
- 4 places for IV pole holder.
- 3 inches wheels as bumpers on each corner.
- Oxygen cylinder holder.
- Safe working load 200kg. • Mattress, IV pole.
- Optional: Aluminum side rails, foldable, 5 inches castors 4 with brakes .
- Optional: POWER PACKER hydraulic pump Netherlan.
- Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترميل

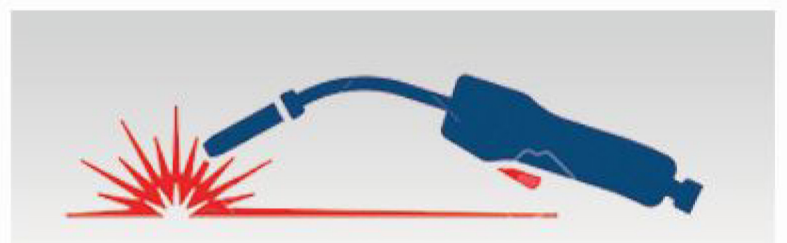

Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون



Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan

إختياري : سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم