



Square pipe
40*70 *2mm

seamless pipe
D90mm
thickness 3mm
مواشير سيملس
قطر 9 سم
تخانة 3 مم

Optional
LINAK



Easy to attach
and detach
سهل التركيب والازالة



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترميز




Optional: Double X ray translucent surface
that allows full body scan
إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح باجراء
فحص على كامل الجسم



Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون

colors

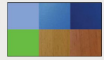

Electric bed

BED 3EB581

سرير كهربائي

- 4 sections bed board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent, cassette holder slot, can be extended with the bed length
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable.
- 5 inches castors 4 with brakes.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions Length: 216 cm, Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° Leg rest lifting from 0° to 45°, auto contour position.
- 3 motors can be manually operated with hand crank, noiseless.
- Hand control.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: LINAK motors Denmark
- Optional: Double X ray translucent surface that allows full body scan

- سطح السرير مكون من 4 أجزاء. مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL)، منفذ للأشعة، حامل لكاسيت الأشعة، أجناب بلاستيك ABS 2 قطعة قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS.
- جسم السرير مصنوع من علب 4 x 6 سم و 4 x 7 سم السمك 1.8 مم، دهان إلكتروستاتك مزدوج ب 4 محادات 2 من كل جهة. ملحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميز.
- الأبعاد: الطول 216 سم، العرض: 98 سم، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.
- الحركات: زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70°، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45°، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت.
- 3 موتور، يمكن تشغيلها يدويا، صوت المواتير منخفض، وحدة تحكم لليد.
- 4 أماكن لحامل المحلول، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل، 4 حامل كيس بول.
- الحبل الأمان للتشغيل 250 كيلوجرام.
- إختياري: إمكانية تركيب مواتير ماركة LINAK (صناعة دنيمارك).
- إختياري: سطح مزدوج منفذ للأشعة يسمح بإجراء المسح على كامل الجسم